

## Autoclave AES-8



### Aplicaciones

Indicado para esterilizar: medios de cultivo, vidrio, líquidos, plástico, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.

### Ventajas

- Pequeño y fácil de uso
- Conexión a PC (USB)
- Puesta en marcha programable
- Programa de control

### Características


- Mueble exterior y encimera en acero inoxidable AISI-304.
- Depósito y tapa en acero inoxidable 18/10
- Regulación temperatura por microprocesador.
- Incorpora conexión RS-232 para conectar a un ordenador
- Válvula manual de desvaporización y drenaje.

### Seguridad

- Válvula y termostato de seguridad.
- Cierre de seguridad de la tapa.

## AES-8

**Se suministra con**  
Bandeja protectora de resistencia  
y cesto de acero inoxidable.

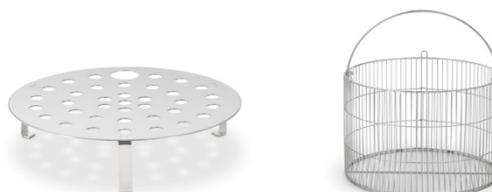

## Datos Técnicos

Referencia Reference Référence	Volumen total / útil Total volume / usable Volume total / utile l	Dimensiones útiles cámara Usable chamber dimensions Dimensions utile chambre Ø x H mm	EXTERIOR L x D x H mm	Temp. °C	Presión máx. Max. pressure Pression max. bar	W	Kg
<b>AES-8</b>	8/6,8	220 x 180	410 x 355 x 430	100-127	1,5	1000	11

Conexión eléctrica: 230V (1P+N), 50/60 Hz.  
Posibilidad de modificar la tensión bajo pedido.

## Accesorios

### CESTO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL WIRE BASKET / PANIER EN FIL D'ACIER INOXYDABLE

Para autoclave de For autoclave of Pour autoclave de	Referencia Reference Référence	EXTERIOR Ø x H mm	INTERIOR Ø x H mm	N.º cestos / autoclave No. baskets / autoclave Nº paniers / autoclave	Kg
8 L	<b>CV-8</b>	Ø 200 x 150	Ø 190 x 145	1	0,5



### PROGRAMA SW7000

• Conexión PC  
vía RS232.

Referencia: **SW7000\***

\* Serie AES, AE-DRY

### SOFTWARE SW7000

• PC connection  
for RS232.

Reference: **SW7000\***

### LOGICIEL SW7000

• Connexion RS232  
pour PC.

Référence: **SW7000\***



### CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

• Rollo de cinta indicadora  
adhesiva de control de  
esterilización.

Referencia: **TEST-CT\***

\* Todos los modelos / All models / Tous les modèles

### STERILIZATION CONTROL TAPE

• Sterilisation indicator  
tape.

Reference: **TEST-CT\***

### RUBAN DE CONTROL DE STÉRILISATION

• Rouleau de ruban  
adhésif pour le contrôle  
de la stérilisation.

Référence: **TEST-CT\***



**20 MIN. 121°C**

Viraje de color / color change / changement du couleur